



"Everything, including
your body, is composed of

energy

- Albert Einstein



Gunalight er en norsk omsøkt patentert oppfinnelse som du enkelt og smertefritt kan benytte selv. Gunalight er bruk av lysenergi via definerte punkter på kroppen. Oppfinnelsen bygger på læren om akupunktur og er sammensatt av nyutviklet og spesialtilpasset teknologi.

Produktet er oppfunnet og designet i Norge.

Gunalight-historien

Jan Fredrik Solberg er født i 1944, oppvokst i Kristiansand og er oppfinner av Gunalight. Han har jobbet som healer i 40 år. Utviklingen av produktet har tatt 10 år. Solberg har vært spesielt opptatt av at Gunalight ikke skal være skadelig for mennesker eller dyr. Oppfinnelsen er gjort på idealistisk grunnlag uten støtte fra verken industrien eller privateinvestorer. Det er ganske enkelt en spesiell mann med spesielle egenskaper som har utviklet produktet. Produktet er bygget på tradisjonell lære om energier og sammensatt med nyutviklet og spesialtilpasset omsøkt patentert teknologi.

Lovgivning

På grunn av en internasjonal meget restriktiv lovgivning er det ikke mulig å si annet enn at Gunalight «kan virke positivt mot». Ved å bruke Gunalight kan du gjøre deg opp din egen mening. Det er smertefritt og enkelt å bruke Gunalight.





Hva er Gunalight?

Gunalight benytter meridianer som er det samme prinsippet som i akupunktur. Meridianer er usynlige kanaler i kroppen som energiene i kroppen sirkulerer gjennom. Når energien flyter fritt gjennom meridianene er kroppen balansert og sunn. Blir energien blokkert, stagnert, eller svekket kan det resultere i fysisk, mental eller følelsesmessig endring i helsen. Ubalanser kan skyldes problemer i enten den fysiske eller følelsesmessige tilstanden. Gunalight kan motvirke disse ubalansene. Gunalight filtrerer lys gjennom en krystall som skaper energi og stimulerer de ulike punktene på kroppen.

Lys kan forbedre blodsirkulasjonen. Mange fysiologiske prosesser vil kunne bedres som følge av økt blodgjennomstrømming. Lys kan skape energibølger som kan øke produksjonen av antistoffer og kan redusere betennelser.

Tilstrekkelig mengde med oksygen er vitalt for en god helse. Cellene i kroppen er avhengig av oksygen. Oksygenet sørger for bevegelse i kroppen og tillater den å helbrede seg selv via cellefornyelse. Om vevet blir mettet med oksygen kan det styrke de hvite blodcellene som kan hjelpe til med å bekjempe bakterier, virus og sopp. Oksygen stimulerer også frigjøring av kjemikalier som kan skape blokkeringer i blodstrømmen og kan dermed stimulere fornyelse av vev.

Det er ikke alltid like lett å forstå at fremtiden er her nå:

“Det er en forbløffende oppfinnelse,
men hvem vil noensinne
gjøre bruk av den”

*USAs president Rutherford
B. Hayes etter å ha fått
telefonen demonstrert
i 1876.*

Generelt om bruk av Gunalight:

Gunalight er ufarlig å bruke, men vi oppfordrer til bruk etter våre anbefalinger. Tilbakemeldinger fra brukere av Gunalight er varierende med hensyn til opplevelsen under bruken. Noen kan føle varme eller kulde, andre en kribling eller prikkende følelse i ulike deler av kroppen. I noen tilfeller føler man ikke noe. Om du føler noe eller ikke, har ingen betydning for resultatet. Etter at du har brukt Gunalight kan noen oppleve en matthetsfølelse eller tretthetsfølelse. Det er heller ikke unormalt at du sover mer enn normalt den dagen du bruker Gunalight.

Bruken er smertefri. Om du bruker produktet kortere enn anvist vil du risikere at resultatene uteblir. For å få riktig effekt av bruken krever det at du treffer de definerte punktene. Vi anbefaler ukentlig bruk. Du kan da holde energibanene åpne og føle deg bedre i kroppen uavhengig av din generelle helse.

VIKTIG:

Benytt Gunalight maks én gang pr. dag pr. side. Kroppen kan jobbe med å aktivisere energien de neste 12 timene. For å få ønsket effekt må du ikke være alkoholpåvirket under bruken. Effekten reduseres også om du inntar alkohol de første fire timer etter bruken. Om du utfører hard trening eller andre anstrengende aktiviteter seks timer etter bruken vil du kunne tappe kroppen for energi eller kunne oppleve ubehag ved utmattelse. Vi anbefaler derfor at du ikke bruker Gunalight før hard fysisk trening. Normal aktivitet er uproblematisk om du bruker Gunalight utført etter våre anbefalinger.


Hvem kan bruke Gunalight?

Alle. Vi anbefaler at du prøver å bruke Gunalight selv eller får noen til å hjelpe deg.

Hvor ofte kan jeg bruke Gunalight?

Det vil variere fra person til person. Du må ikke bruke Gunalight mer enn én gang pr. side pr. dag. For at energien skal få tid til å jobbe i kroppen, må det gå minst 12 timer før du bruker produktet på motsatte siden.

Les mer om
bruk av Gunalight
på de neste
sidene.

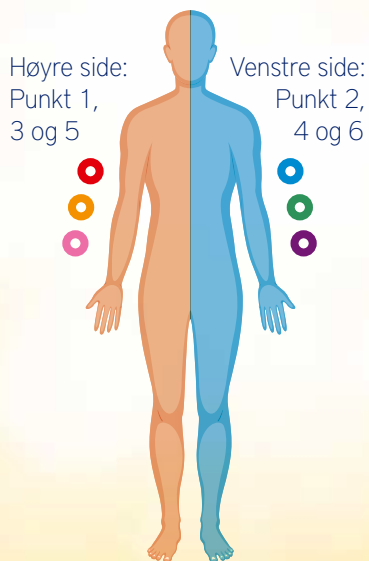

Punkt nr. 2, 4 og 6: Kan regulere muskelaktiviteten
Punkt nr. 1, 3 og 5: Kan påvirke de indre organene

Anbefalt tidsbruk pr punkt:

Hvem behandles	Voksen	Barn fra 1-18 år
Bruk nr. 1-2	15 minutter pr. punkt	10 minutter pr. punkt
Bruk nr. 3-20	10 minutter pr. punkt	5 minutter pr. punkt
Bruk deretter	5-7 minutter pr. punkt	2-4 minutter pr. punkt

Unntak er ved kroniske plager, betennelser og virus.

Da er det 15 minutter pr. punkt for voksne og 10 minutter for barn.

Begynn bruken på partallpunkt; punkt nr. 2-4-6 og vent minimum 12 timer før du bruker oddetallpunkt; punkt nr. 1-3-5. Det er viktig at rekkefølgen overholdes slik at energiene ikke virker mot hverandre. Gjør som anbefalt og energiene kan virke positive på hverandre.

Det er ikke nødvendig å bruke alle partallpunktene eller oddetallpunktene på en gang.

Det er samme effekt om du fortsetter bruken noen timer etter, men husk da at du ikke skal bruke samme punkt(er) som tidligere. Husk også å vente minimum 12 timer mellom oddetall- og partallpunktene.

Du må ikke bruke Gunalight lenger enn anbefalt, da det kan tilføre kroppen for mye energi og føre til at du får ubehag eller føler deg utmattet.

Hvor ligger de definerte punktene jeg skal bruke Gunalight på?


● Punkt 1

Høyre fots innside, to tommelbredder fra undersiden av tåballens ankelknoke. Gunalight plasseres i skillet mellom rød og hvit hud.



● Punkt 3


Høyre hånds underside av underarm. Gunalight plasseres to egne tommelbredder fra håndleddfolden, opp mot underarmen, i linjen med langfingeren mellom de to senene.

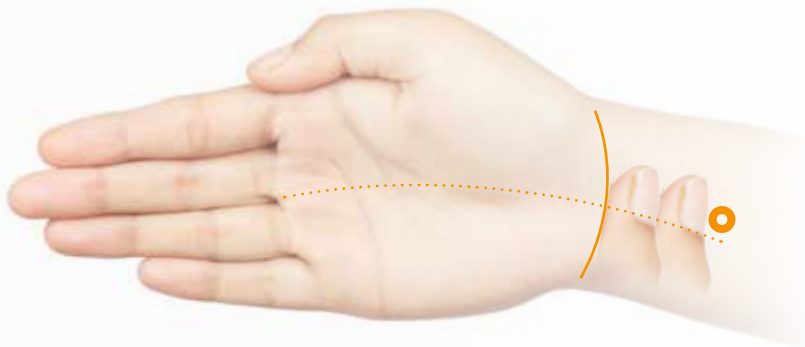

● Punkt 5

Høyre fot nedenfor innvendig ankel. På undersiden av ankelknoken finner du en fordypning hvor du plasserer Gunalight.



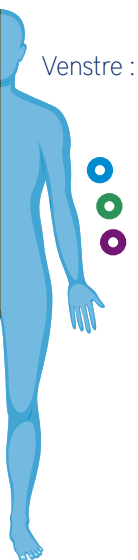

Venstre :

● Punkt 2

Venstre vrist mellom lilletåa og den neste tåa. Du kjenner en liten fordypning mellom de to tærne ved å dra fingeren opp mellom tærne opp mot vrista og over den skråstilte senen. Gunalight plasseres i denne fordypningen.



● Punkt 4

Venstre hånds overside av underarm. To egne tommelbredder fra håndrotsbeinet ligger en fordypning hvor du plasserer Gunalight.



● Punkt 6

Venstre fot nedenfor utvendig ankel. På undersiden av ankelknoken og bak senen er det en fordypning hvor du plasserer Gunalight.



Kroppens energibaner - meridianer

Punkt 1: Chong Merdianen

Kongeveien, den penetrerende merdianen.

Polaritet: Yin.

Merdianens inngangsnøkkel: MP 4.

Hjerte, bryst, abdomen, og bekkenbunden.


4 og 5 ryggvirvel.

Beliggenhet:

Den starter i bekkenet og kommer ut via mellomkjøttet med to grener. Første gren går inn i lumbalområdet til 4 og 5 ryggvirvel. Den andre går framover og opp til nedre del av magen og over til nyre punkt 11. Der går den i to baner frem til nyre punkt 21 og videre til halsen og kommer opp via underkjeven fram til munnen der den slår en sløyfe rundt. Det går også en sidegren ut fra nyre punkt 11 nede på innsiden av benet til den innvendige ankelen.

Hovedfunksjoner:

1. Havet for alle hovedmerdianene.
Regulerer virkningen på alle 12 regulære merdianer.
2. Regulerer menstruasjonen.
«Chong merdianen er havet av blod.»
3. Regulerer mage, milt, lever, galle, trykkarm, tynntarm, nyre, blære og urinledere.

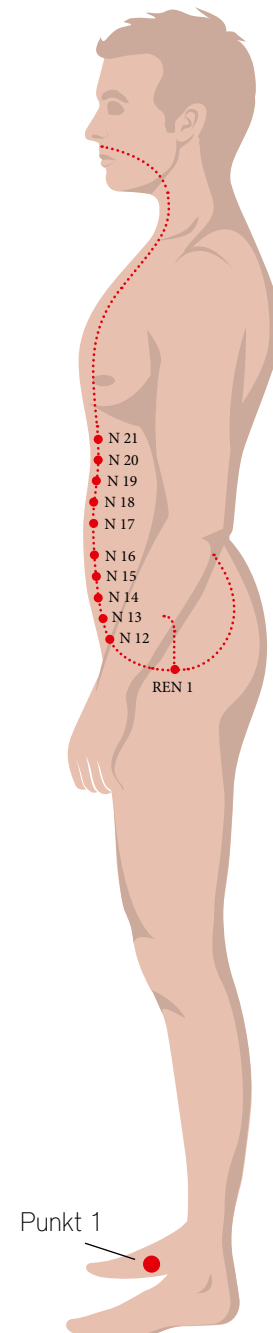

Punkt 2: Dai Merdianen

Beltemeridianen, den bindende merdianen.

Polaritet: Yang.

Merdianens inngangsnøkkel G 41.

Rygg, side og abdomen.


Regulerer forholdet mellom øvre og nedre kroppshalvdel.

Beliggenhet:

Den har sitt utspring i L-4 og danner et horisontalt belte omkring kroppen.

Hovedfunksjoner:

1. Binder alle merdianer som går opp eller ned i kroppen. Regulerer dermed balansen mellom strømmen oppover og nedover qi.
2. Regulerer livmor, og vaginal utflod. Påvirker nyre og bekkenområdet. Korrigerer tynntarm og tykktarm.

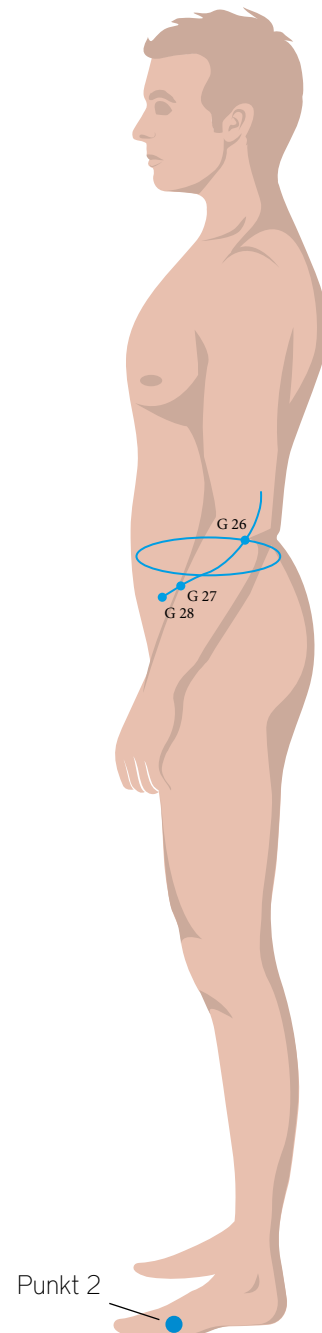

Punkt 3: Yin Wei Merdianen

Yin organene, essensen.

Polaritet: Yin.


Merdianens inngangsnøkkel: KS 6.

Beliggenhet:

Den starter i N 9, går på innsiden av låret opp mot MP 6 som yin-koordinator. Videre går den mot MP 12, MP 13, MP 14, MP 15 og MP 16. Fortsetter i linje med brystvortene frem til LE 14, går så i en bue inn mot REN 22 og 23. Den avsluttes i tungenoten.

Hovedfunksjoner:

1. Regulerer den generelle muskelaktiviteten.
Styrer åpning og lukking av øynene.
Styrer også stigning av kroppsvæsker.
Styrer nedadgående qi med kretsløp.
2. Løser opp stagnasjoner i hjerte.
Løser opp toksiner (sykdomsfremkallende) bakterier.
Driver ut patogene bakterier (sykdomsfremkallende mikroorganismer). Løser slim og åpner hals.

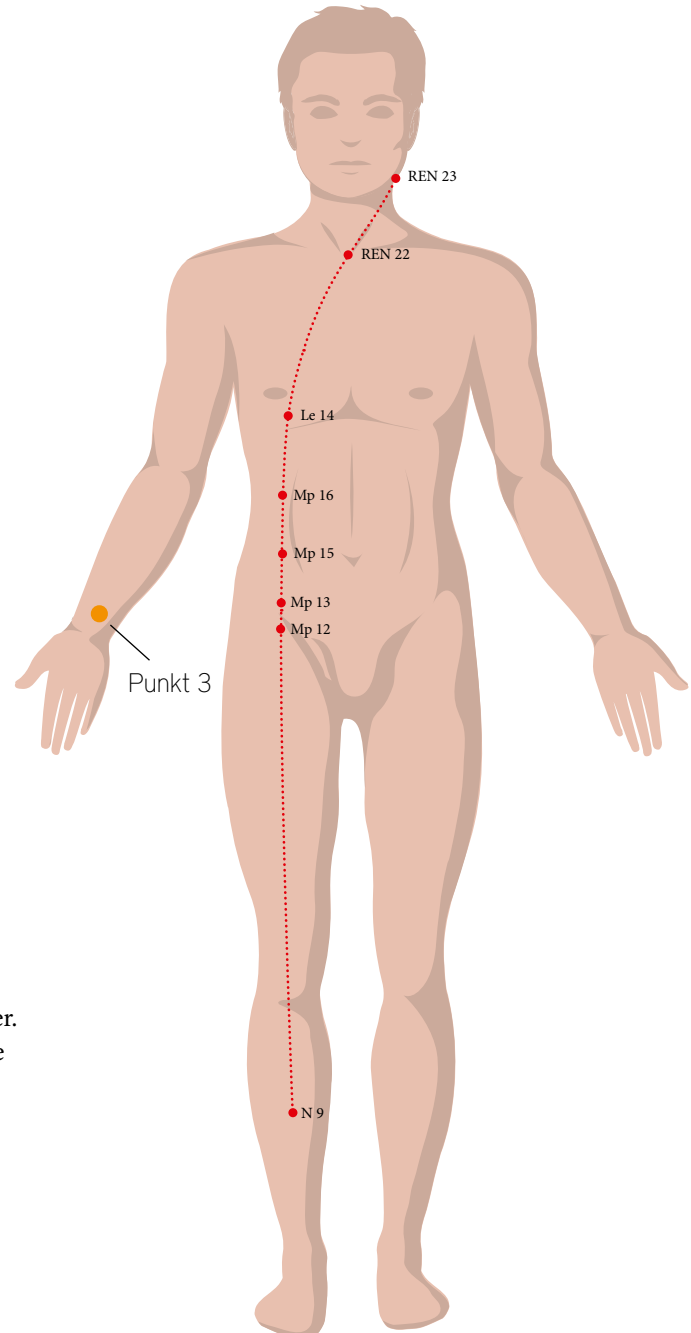

Punkt 4: Yang Wei Meridianen

Kroppens Yang organer. Forsvarer qi, kroppens ytre.

Polaritet: Yang.


Meridianens inngangsnøkkel 3E 5.

Beliggenhet:

Starter i B 63 og stiger opp mot ankelen. Den går sammen med G 35 opp til hofteleddene og går deretter på baksiden av kroppen. Videre opp mot skulderen den har kontakt med TY 10, videre inn mot 3E 15 og G 21 og oppover halsen via DU 14, 15, 16, 17, 18, 19 og 20. Fortsetter så videre til DU 16 og Du 15 så via issebein og tinningbein, deretter ned mot øre og avslutter sin sløyfe på halsen.

Hovedfunksjoner:

1. Regulerer den generelle muskelaktiviteten.
Styrer åpning og lukking av øynene.
Styrer stigning av kroppsvæsker.
2. Roer leddbånd og muskler. Roer sinnet.
Aktiverer blod, sprer feber og løser slim.
Løser opp bindinger, klarer sinn og har effekt på tale.
Fjerner hindringer i leddene. Åpner kanalene i nesen.
Stivhet i nakke og muskler. Klarer hode og lyser opp øyne.

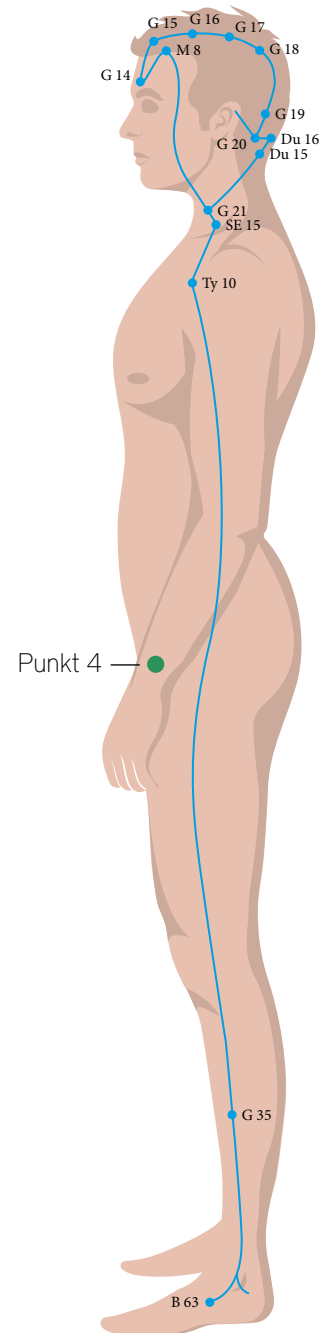

Punkt 5: Yin Chiao Merdianen

Oppadstigende Yin.

Polaritet : Yin.

Merdianens inngangsnøkkel N 6.


Påvirker: harmonien i Yin, Yin-reserver.

Beliggenhet:

Har sin rot i N 2, men kommer fysisk fram i N 6 som regnes som startpunktet. Det går dypt på innsiden av beinet opp mot lysken og passerer like i ytterkant av kjønnsorganet. Går så gjennom kroppens hulrom og kommer opp i øvre trippelvarmer (hjerte, kretsløp og lunge) hvorpå den går opp i halsen gjennom kjeven og munnviken til sluttstedet B 1 der den forenes med Yang merdianen.

Hovedfunksjoner:

1. Styrer strømmen i Yin hovedmerdianene. Styrker og balanserer strømmen i hver og regulerer deres generelle aktivitet.
2. Styrer tap av bevissthet (frossen følelse i lemmene, kraftig kulde i armer og bein). Regulerer livmor. Fjerner hindringer i hals, slim som blokkerer halsen og låste kjever. Demper feber og lyser opp øyne.

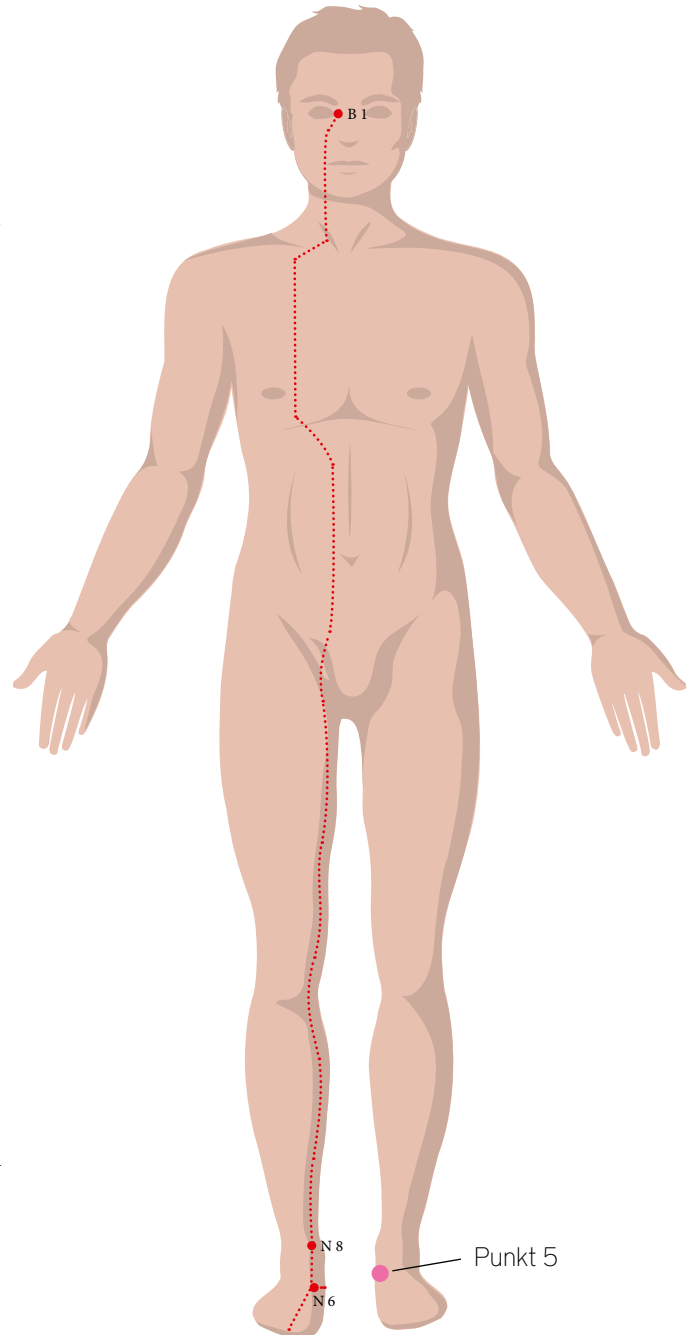

Punkt 6: Yang Chiao Merdianen

Oppadstigende Yang.

Merdianens inngangsnøkkel B 62.


Påvirker: harmonien i Yang, fordeler Yang-reserver.

Beliggenhet:


Starter under ankels underside B 62, går videre ned mot hælen B 61 før den stiger opp mot B 59 og så i linje opp til G 29, videre til skulderens bakside TY 10, og rundt skulderen til CO 15, hvor den svinger opp på siden av halsen over kjeven til munnviken M4, M3, M1, for så å gå på siden av hoden til G 20.

Hovedfunksjoner:

1. Styrer strømmen i Yang-hovedmerdianene.
Styrker og balanserer strømmen i hver og regulerer deres generelle aktivitet.
2. Demper infeksjoner. Sprer hevelse. Letter smerte.
Aktiverer blod. Roer leddbånd og muskler.
Løser opp bindinger. Styrer svimmelhet. Fjerner virus.
Klarner hode og skjerper hørsel. Styrker nedre del av ryggen og beina.

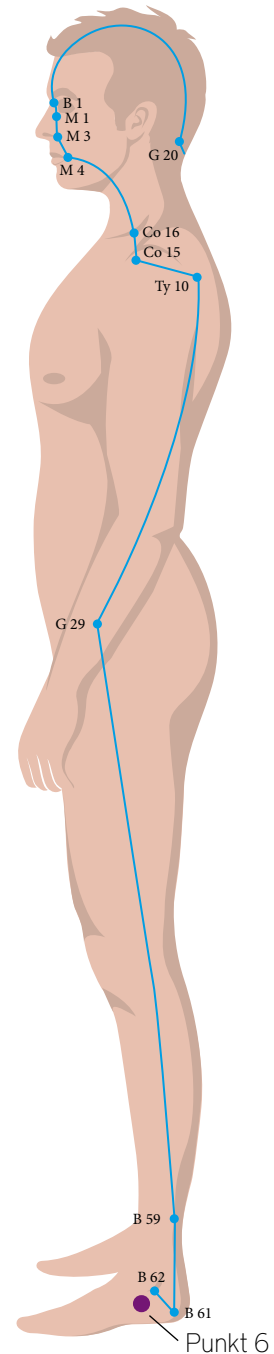

Du som bruker og bestiller Gunalight gjør at verden går et skritt i riktige retning. Du vil møte motstand, men det gjorde også de som en gang sa at jorda var rund. Velkommen som nytenkende og innovativ bruker og eier av Gunalight.

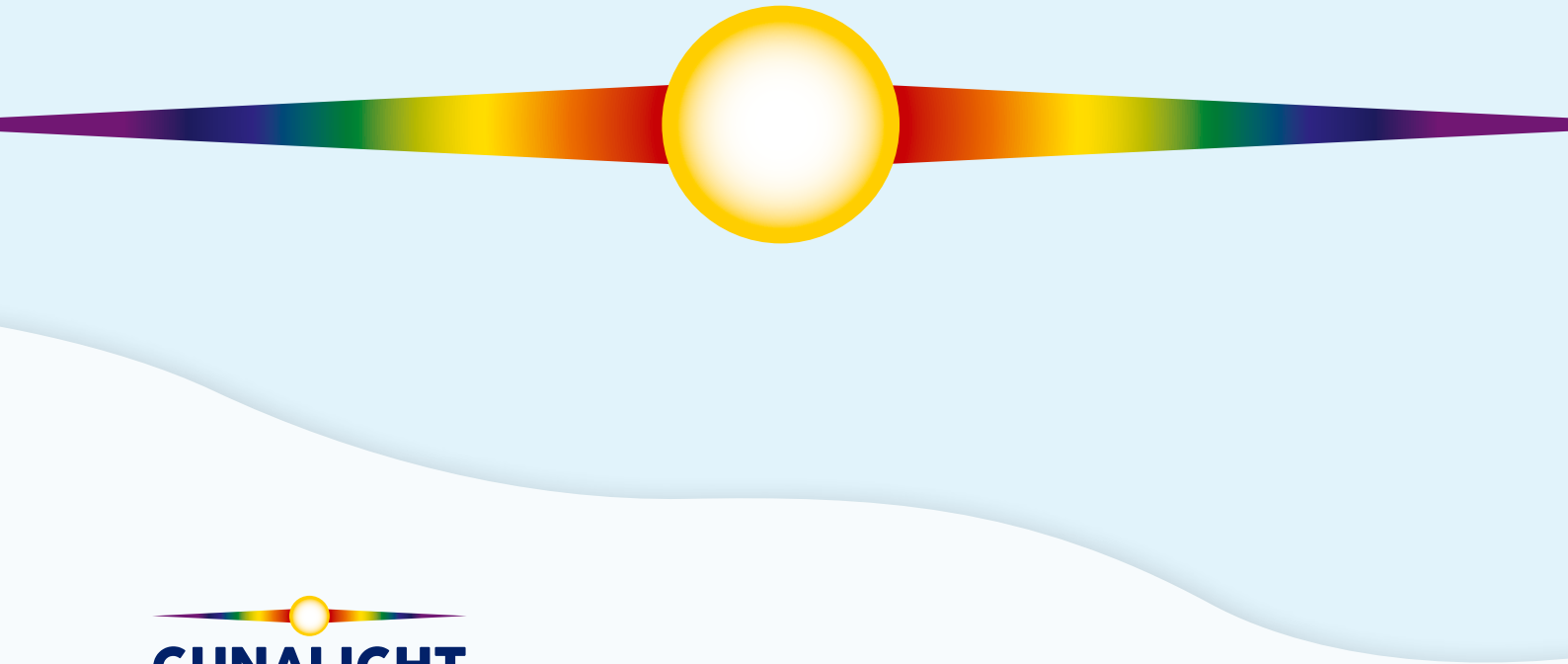

www.gunalight.no

Vi presiserer at produktet ikke er ment å diagnostisere, behandle, kurere eller motvirke noen form for sykdom. Dette må vi si da vi ikke har vitenskapelig bevis for å selge Gunalight som verken legemiddel eller medisinsk utstyr. Fremtiden vil vise om bruken av Gunalight kan komme inn under en av disse kategoriene.